
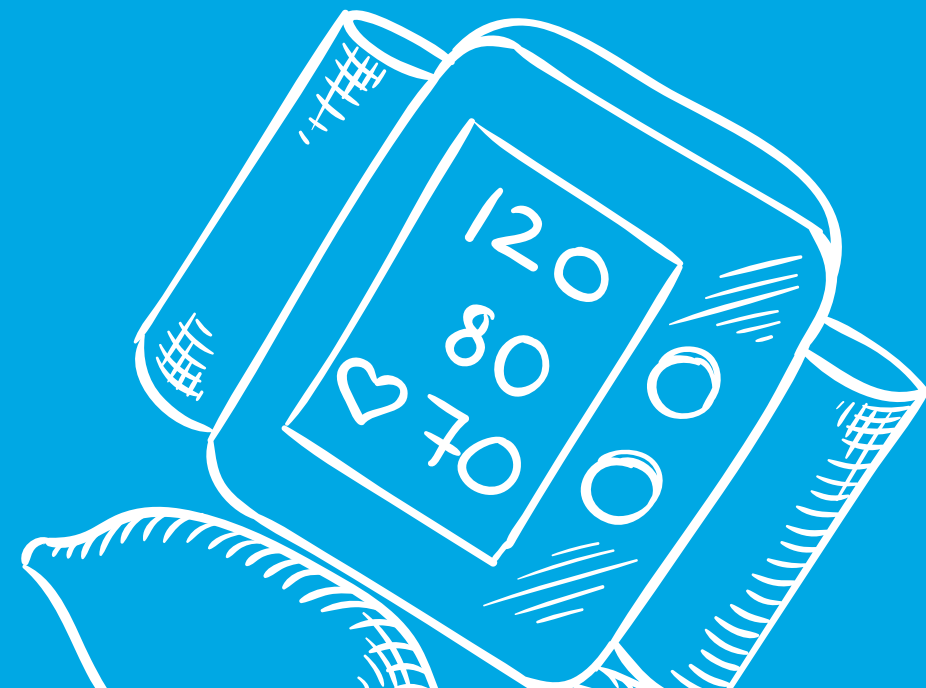



Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

WSKAZÓWKI

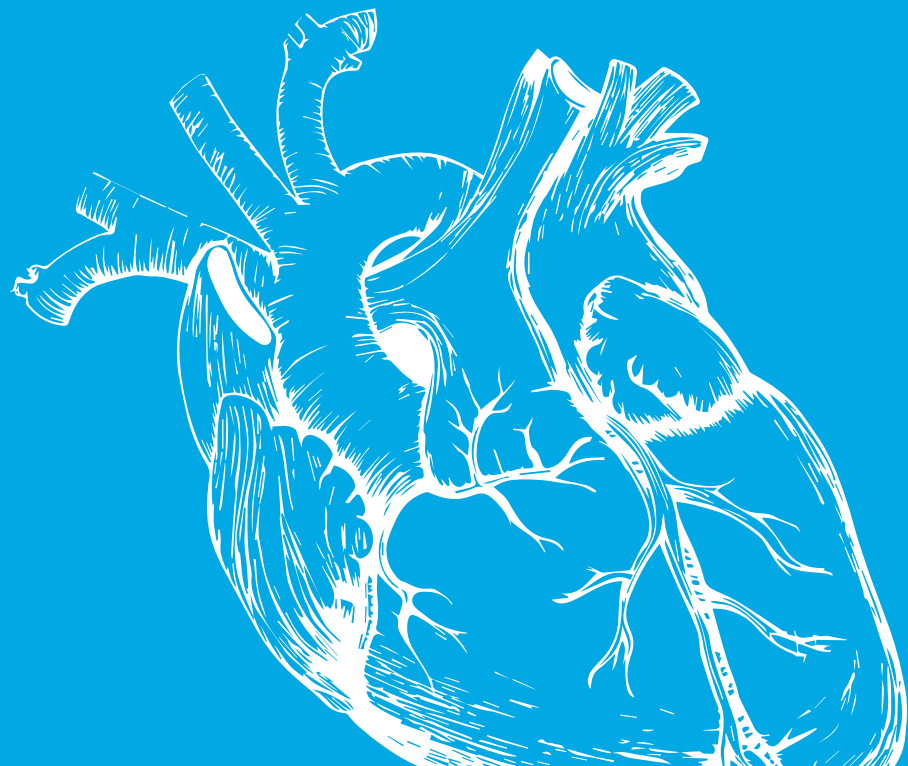


1

Ciśnienie tętnicze krwi (CTK) mierzy się za pomocą ciśnieniomierza zegarowego/półautomatycznego/automatycznego.

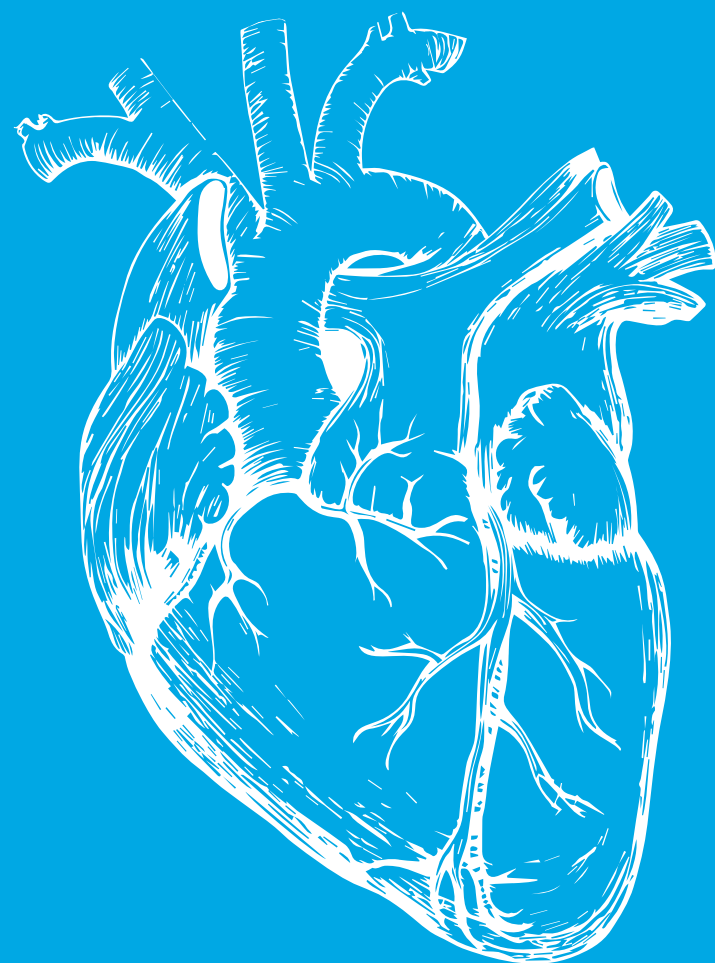


2

Mankiet ciśnieniomierza należy założyć tak, aby jego dolna krawędź znajdowała się na wysokości 2,5 cm od dołu łokciowego.

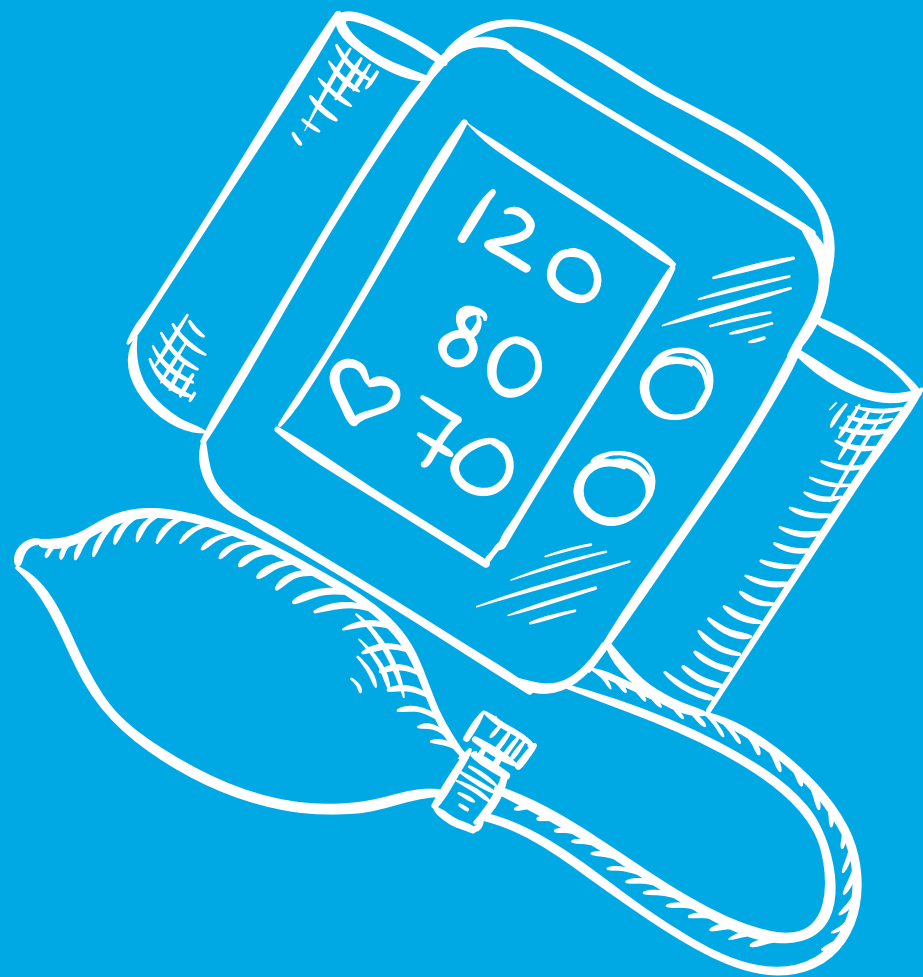


3

Mankiet ciśnieniomierza zakłada się bezpośrednio na pozbawione ubrania ramię. Należy uważać, aby podwinięty rękaw odzieży nie powodował dodatkowego ucisku, który może zafałszować pomiar CTK. Dlatego zaleca się, aby na zabiegi hemodializ pacjent zakładał odpowiednią odzież umożliwiającą całkowite odkrycie ramienia, na którym będzie założony mankiet.

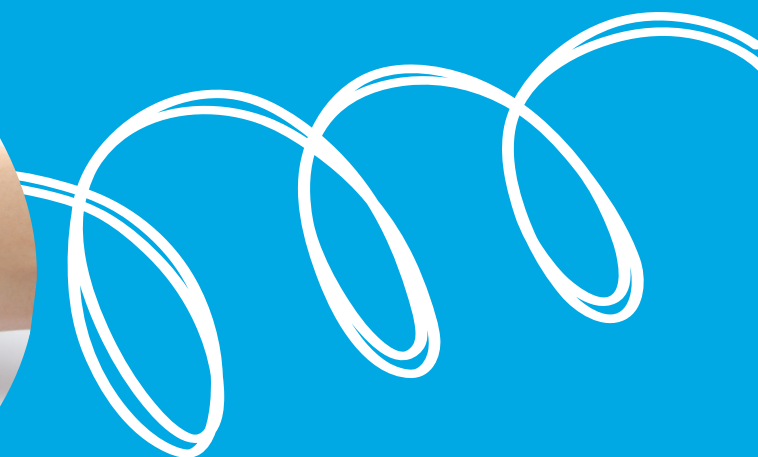

4

Mankiet (jego długość) powinien być dobrany adekwatnie do średnicy ramienia i dokładnie zapięty tak, aby w szczelinie pomiędzy ramieniem mogły zmieścić się dwa palce.

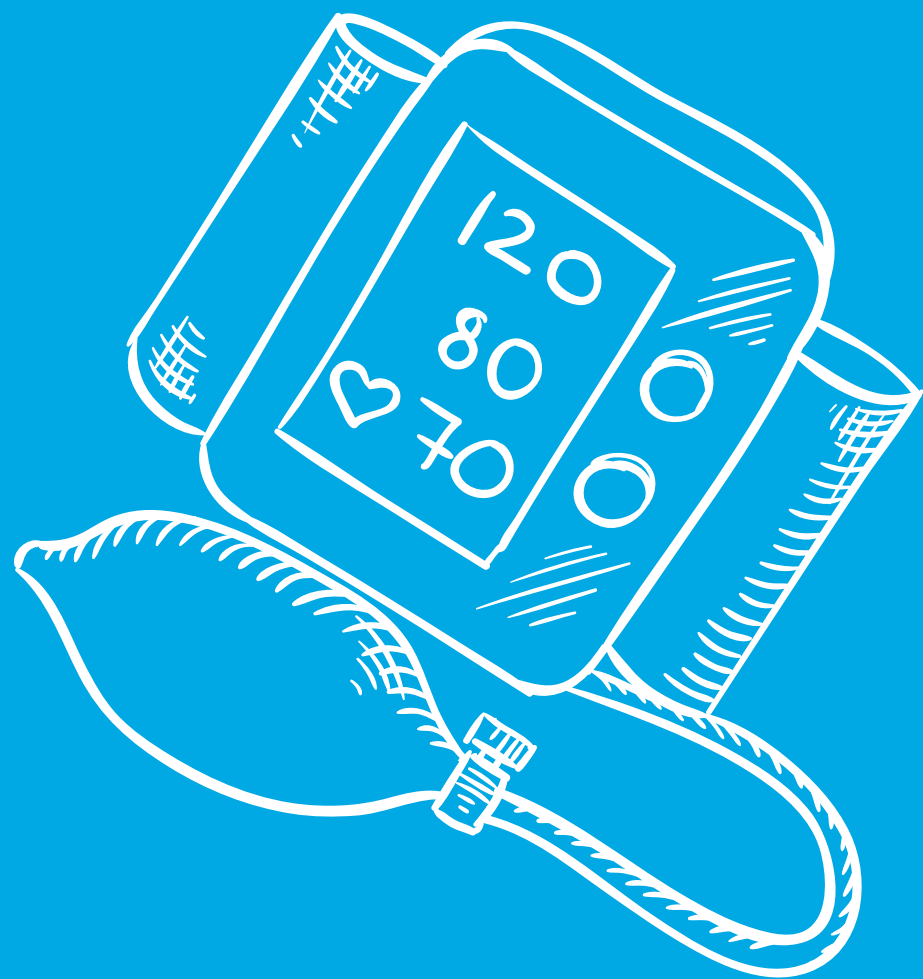


5

Kończyna górna, na której dokonuje się pomiaru CTK, powinna być stabilnie podparta (na podłokietniku fotela dializacyjnego), w taki sposób, by mankiet znajdował się na wysokości serca.




6

Pacjent powinien mieć rozluźnioną kończynę, utrzymując wewnętrzną stronę dłoni skierowaną w górę, palce zgięte w naturalny sposób, nie zaciśnięte.

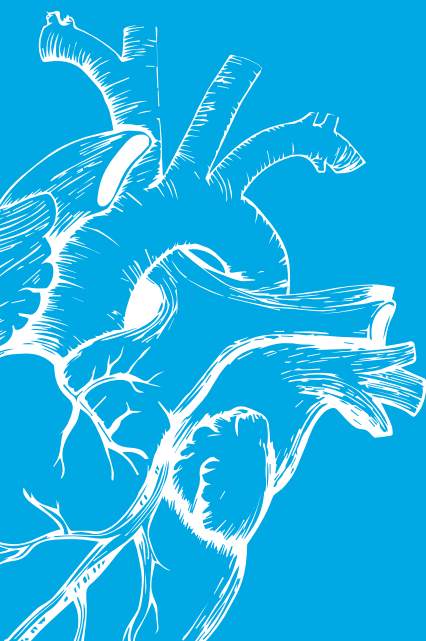

7

W trakcie pomiaru CTK pacjent nie powinien rozmawiać.

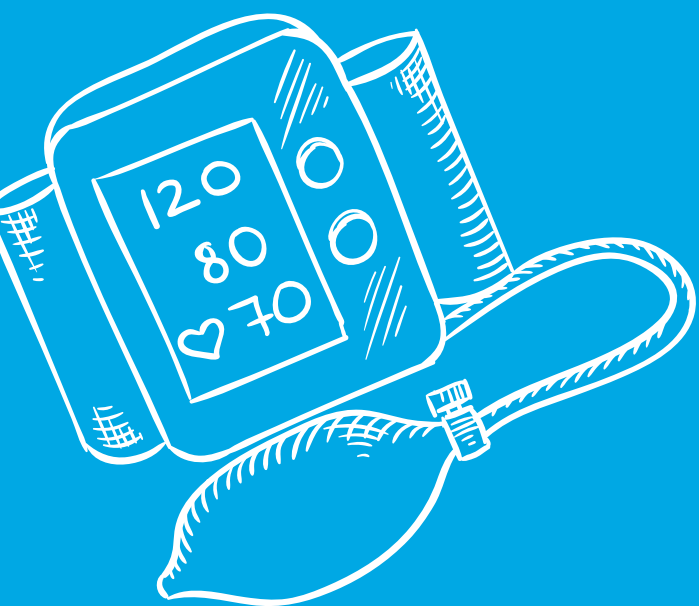

8

W sytuacji niepowodzenia pomiaru CTK, bezpośrednio po pierwszym można wykonać kolejny pomiar.

9

Uzyskane wartości pomiaru należy odnotować (bez zaokrąglania wyniku) w dokumentacji pacjenta.

